



Компактные анализаторы влаги с превосходными рабочими характеристиками просты в использовании и уходе

Компания OHAUS продолжает развивать успех анализаторов влаги MB35 и MB45 и выпустили на рынок новые анализаторы влаги общего назначения MB23 и MB25. Благодаря сочетанию высокого качества и долговечности анализаторы MB23 и MB25 обеспечивают получение точных результатов, а также простоту эксплуатации и технического обслуживания.

Основные характеристики

- Анализаторы OHAUS MB23 и MB25 обеспечивают получение точных результатов с высокой воспроизводимостью при разрешении 0,1% и 0,05% соответственно.
- **Простота использования.** Работать с анализатором очень просто. Просто нажмите и удерживайте кнопку температуры или времени, чтобы задать параметры сушки, затем положите образец и начните процесс сушки. Благодаря простоте использования анализаторы MB25 и MB23 отлично подходят для решения повседневных задач, выполняемых операторами любой квалификации.
- **Удобная конструкция.** Анализаторы OHAUS MB25 и MB23 занимают небольшую площадь – 17 x 13 x 28 см. Удобная для чистки нагревательная камера не создает для оператора трудностей при повседневном проведении технического обслуживания.


Анализаторы влаги общего назначения MB23 и MB25

Модель	MB25	MB23
НПВ	110 г	
Производительность (СКО)	0,2% (образец 3 г) 0,05% (образец 10 г)	0,3% (образец 3 г) 0,2% (образец 10 г)
Разрешение	0,05% (0,005 г) 0,10% (0,01 г)	
Объем выборки	От 3 г до 20 г (типичное значение); минимум 0,5 г	
Выходной сигнал	RS-232 (двунаправленный)	
Таймер	1–99 минут с шагом от 30 секунд до 60 минут	
Технология нагревания	Галогенная	Инфракрасная
Диапазон температур	От 50°C до 160°C с шагом 5°C	
Электропитание	100-240 В, 50/60 Гц	
Диапазон тарирования	До НПВ	
Диапазон рабочих температур	От 5° до 40°C (от 41° до 104°F)	
Тип дисплея	Специальный ЖК-дисплей с подсветкой	
Отображаемые параметры	%влаги, % сухого остатка или вес (г), темп., время	
Диаметр чашки весов	90 мм	
Размеры (Ш x В x Г)	17 x 13 x 28 см	
Собственный вес	2,3 кг	
Вес в упаковке	3,9 кг	
Принадлежности (входят в комплект)		
Чашки для образцов, 50 шт.	Стандартные	
Защитный чехол	Стандартный	
Держатель чашки весов	Стандартный	Специальный (PN 802524776)



Быстрые результаты

Галогенная технология нагревания позволяет начать процесс сушки образцов в считанные секунды. Рабочая температура от 50° до 160°C с шагом 5°C.

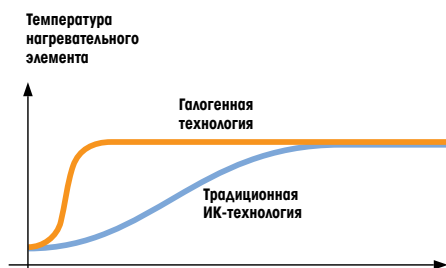

Анализаторы OHAUS MB25 с галогенным нагревом работают на 40% быстрее, чем анализаторы MB23 с традиционным инфракрасным методом нагрева.



Дополнительные части и принадлежности

Номер Ohaus

Противоударное устройство	80850000
Температурный калибровочный набор	11113857
Чашки для образцов (50 шт. в коробке)	80850086
Стекловолоконные диски (200 шт. в коробке)	80850087
Многоразовые чашки для образцов (3 шт. в упаковке)	80850088
Многоразовые глубокие чашки для образцов (3 шт. в упаковке)	80252479
Многоразовая проволочная экранирующая сетка	80252477
Держатель чашки весов	80252476
Защитный чехол для клавиатуры	80252475
Термопринтер STP103	80251993
Матричный принтер SF40A	30045641
Кабель для принтера SF40A	12122603
Кабель для принтера STP103	80252581

Передовое качество и техническая поддержка

Весь цикл производства анализаторов влаги Ohaus серии MB контролируется системой управления качеством, сертифицированной в соответствии со стандартом ISO 9001:2008. Больше столетия надежность конструкций и строжайший контроль качества служили отличительными признаками всех продуктов компании Ohaus. Сертифицированы в России и ряде стран СНГ.



Edited with the demo version of Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit: www.iceni.com/unlock.htm

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: <https://ohaus.pro-solution.ru> | эл. почта: osh@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70